

Journées de l'appareillage
Du pied 2017
NANCY 9 et 10 Mars 2017

Les chaussures de sécurité

L'offre du podo-orthésiste
En FRANCE

Que propose-t-on
aux salariés français
?

La réalité, en général :

- C'est l'employeur qui fournit les chaussures
- Souvent, le prix d'achat l'emporte
- Choix très large, que prendre ?
- Le document à compléter pour les risques : très peu fait !
- Obligation de suivi de l'état : peu fait !
- Remplacement : bien dans les grandes entreprises

Conséquences pour les salariés :

- La sécurité n'est parfois pas assurée !
- Le confort du salarié à son poste n'est parfois pas pris en compte.
- Pour les „pieds atypiques“, peu de solutions sont proposées !
- Quelques entreprises font de gros efforts
- Les orthèses plantaires sont parfois prises en charge par l'entreprise

Les solutions de série :

- Les fabricants font de gros efforts !
- Le choix est de plus en plus important
- Les chaussures sont de plus en plus légères!
- Orthèses amovibles et remplaçables
- De rares modèles existent en plusieurs largeurs

La nouvelle offre des podo-orthésistes :

- Le podo-orthésiste est le spécialiste du pied... aussi pour le travail !
- Offre très restreinte jusqu'à ce jour (du moins pour les chaussures aux normes !)
- Volonté d'un fournisseur de développer une gamme complète
- Nécessité de former les podo-orthésistes

La nouvelle offre des podorthésistes :

Une gamme complète : 4 possibilités :

- Chaussures de série „basiques“
- Chaussures de série „premium“, modifiables
- Chaussures en demi-mesure
- Chaussures sur mesure

La nouvelle offre des podorthésistes :

Dans tous les cas :

- Les normes européennes sont toujours respectées
- Possibilité de mettre en place des orthèses plantaires sur mesure
- Large choix, pour couvrir presque toutes les professions.
- Un professionnel seconde les podorthésistes

La nouvelle offre des podorthésistes :

Chaussures de série „basiques“



- Une solution à coût modéré, disponible rapidement

La nouvelle offre des podo-orthésistes :

Chaussures de série „premium“



- Modifiables, disponibles en 3 largeurs

La nouvelle offre des podorthésistes :

Chaussures demi-mesure



- Très grandes largeurs
- Nombreuses options
- Faciles à adapter

La nouvelle offre des podo-orthésistes :

Chaussures sur mesure



- Solution ultime
- Le podo-orthésiste reste maître
- Choix très large, mais coût élevé

Fabrication des chaussures de sécurité sur mesure

Montage des chaussures de sécurité sur mesure



Notice des besoins

-1-

Symbol	Zusatzanforderung:
☐ P	Durchtrittssicherheit
☐ A	Antistatische Schuhe
☐ HI	Wärmeisolierung
☐ CI	Kälteisolierung

Hinweis:

Es ist darauf zu achten, daß die Schuhe mit dem CE-Zeichen versehen sind und eine Konformitätserklärung des Herstellers vorliegt (siehe EG-Richtlinie 89/686/EWG).

Zur Auswahl der an diesem Arbeitsplatz notwendigen Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) sind die auftretenden Risiken zu ermitteln (siehe EG-Richtlinie 89/656/EWG).

Sonstige Anforderungen:

Ort, Datum

Unterschrift und Stempel des
Unternehmers/Sicherheitsbeauftragten

Déroulement

- Notice des besoins
- Tiges
- Lacets
- Formes
- Orthèses plantaires
- Premières de montage
- Semelles en acier
- Bouts de sécurité en Alu
- Semelles d'usure

Déroulement

- Contreforts
- Colles
- Marquage
- Certificats
- Notice antistatique
- Compensations, modification des chaussures, barres de déroulement
- Facturation
- Éléments utilisés : vous ne pouvez pas mélanger des éléments de divers fournisseurs .


Résistance ESD

- ESD = Electrostatic Discharge
- Entre 750 kOhm et 35 mOhm
- ESD en S1 et S2



Les bouts de sécurité Aluminium

- Normalform 11
- Extra-groß Flach 12
- Extra-groß 12

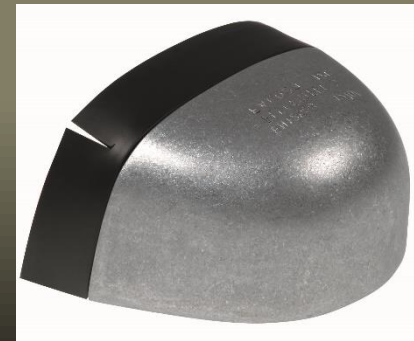

Kits de fabrication :


Exemple chez un fournisseur

- S1, S 2 ou S 3
- Security L: Kit 800 cuir, semelle Leipzig, Bouts Alu: 11 Normalform
- Safety L: Kit 800 Feutre, Semelle Gera, Bout Alu: 11 Normalform
- Securion® L: Kit 850 Feutre ou Individuel, Semelle et double Securion®, Bout Alu: 12 flach ou 12 extra-groß



Montage Chaussures de sécurité®

- Respect du gabarit de première.
- Ponçage cambrure et relevé, + adaptation du bout Alu

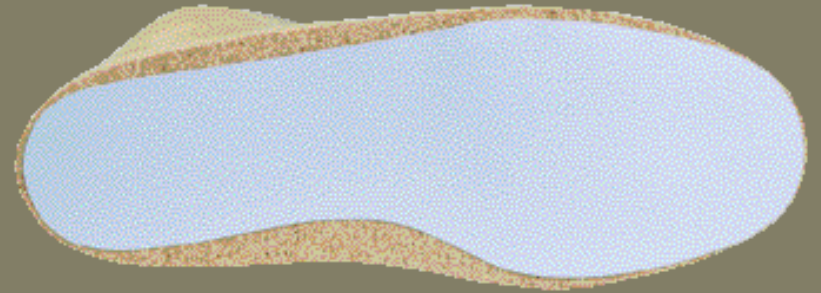

Montage chaussure de sécurité

- Forme avec l'orthèse
- Bouts plastique pour adaptation du bout



Montage chaussures de sécurité

- Matériau thermoformable
- Mise en place



Montage chaussures de sécurité

- Adaptation de la semelle acier individuelle en cas de forme très large



Montage chaussures de sécurité

Montage de la doublure



Montage chaussures de sécurité

- Capitonage
- Bout Alu



Montage chaussures de sécurité

Montage du dessus



Montage chaussures de sécurité

Rempli



Montage chaussures de sécurité

- Double semelle
- Tracé
- Découpes
- Collage
- Pressage



Montage chaussures de sécurité

- Collage de la semelle d'usure
- S3 Ne pas carder la semelle acier !
- Collage
- Pressage



Montage chaussures de sécurité

- Colle PU
- Catalyseur
- Primaire PU
- Halogeneiseur
- Rempli antistatique



Questions

Merci pour votre attention

